

# Cutimed® Sorbact®

Gerenciamento da infecção seguro e efetivo

**Redução  
bacteriana em  
feridas colonizadas<sup>1</sup>  
de até 73,1%**



**Cutimed®**

# É hora de buscar um novo caminho. É hora de **mudar para o verde!**

Devido ao **modo de ação puramente físico**, o **Cutimed® Sorbact®** atrai e remove as bactérias sem a liberação de agentes antimicrobianos. Experimente a eficácia do **Cutimed® Sorbact®**. **Juntos, podemos tornar o gerenciamento de infecções seguro em todos os aspectos**

## Fácil

Sem  
contraindicações

## Seguro

Atrai bactérias  
e fungos

## Clinicamente comprovado

Capacidade de reduzir  
a concentração de  
carga bacteriana em  
até 73%<sup>1</sup> em feridas  
colonizadas







## Atrai bactérias e fungos com **segurança**

A **eficácia do Cutimed® Sorbact®** é baseada no **modo de ação puramente físico**. Isso cria uma variedade de benefícios, tornando seu trabalho diário mais seguro:

- Nenhuma contraindicação conhecida\*
- Sem liberação de agentes antimicrobianos
- Baixo risco de alergia

Além disso, o curativo pode ser usado para:

- Tratamento de longa duração\*\*
- Crianças\*
- Mulheres grávidas ou amamentando devido ao seu modo físico de ação

\* Considere as limitações mencionadas na IFU em relação ao Cutimed Sorbact gel

\*\* As trocas de curativos devem ser consideradas de acordo com as necessidades e limitações específicas do paciente informadas pelo IFU







Cutimed® Sorbact®  
promove



Gerenciamento da infecção  
**completa**




## Facilite seu trabalho com soluções práticas

1. Escolha **Cutimed® Sorbact®** para **gerenciamento e prevenção de infecções**<sup>1,2</sup>
2. Esteja seguro podendo usá-lo para **feridas crônicas e agudas**, sem contraindicações conhecidas
3. Facilite sua **aplicação** 
4. Trate **feridas superficiais e profundas** 


<sup>1</sup> Stanirowski et al. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamoyl Chloride Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. Surg Infect (Larchmt). 2016 Aug;17(4):427-35

<sup>2</sup> Mosti et al. Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study. J Wound Care. 2015 Mar;24(3):121-2; 124-7


# Cutimed® Sorbact® se vincula à bactéria de modo puramente físico

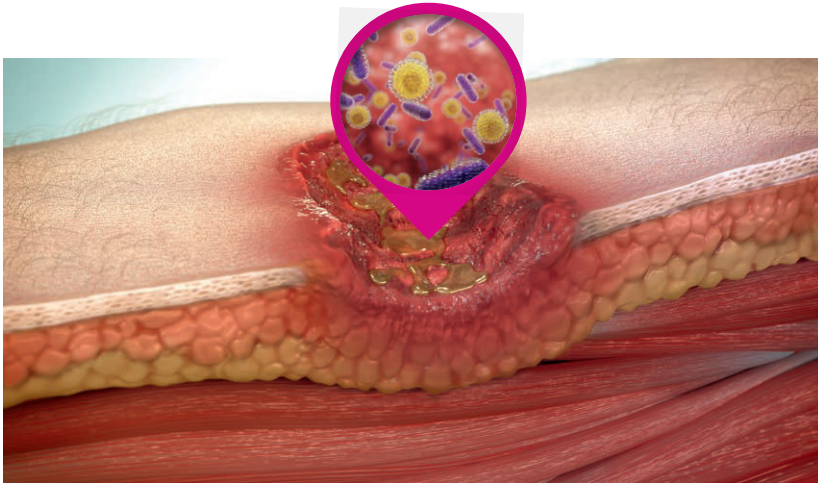

Ferida **infectada** e colonizada

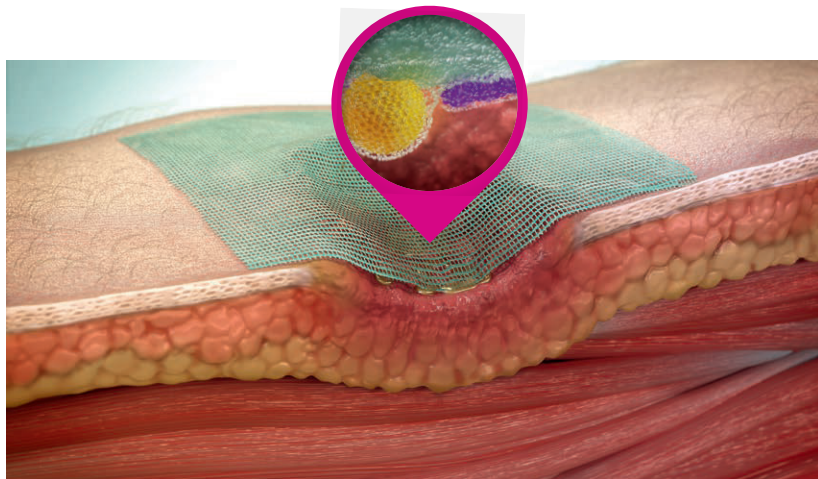

**Cutimed® Sorbact®** é aplicado diretamente na ferida. Bactérias e/ou fungos são atraídos para a malha **Sorbact®**

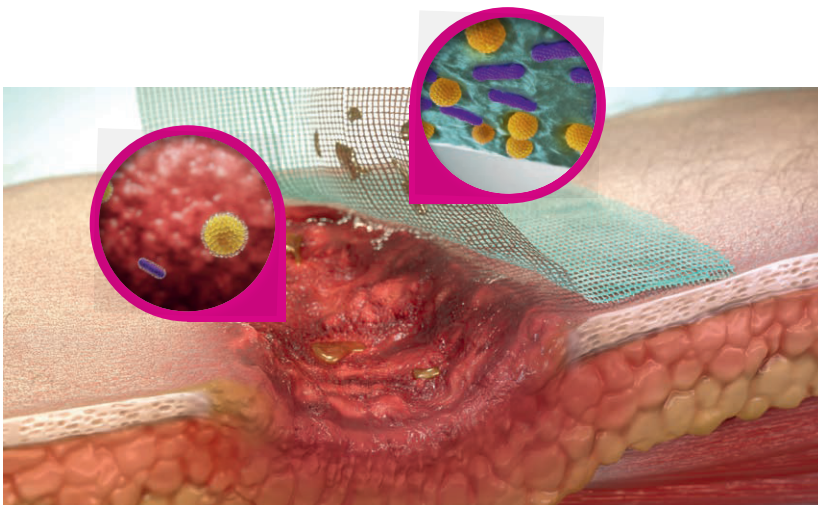

Patógenos ligados são removidos a cada **troca de curativo**


Para saber mais sobre a eficácia e modo puramente físico de ação de **Cutimed® Sorbact®** por favor visite nosso **Canal Cutimed® no YouTube**.





# Cutimed® Sorbact® comprova sua eficácia

Em um estudo randomizado, comparativo, em um único local, com 40 pacientes com úlcera na perna, o Cutimed® Sorbact® foi mais eficaz na redução da carga biológica do que a Prata

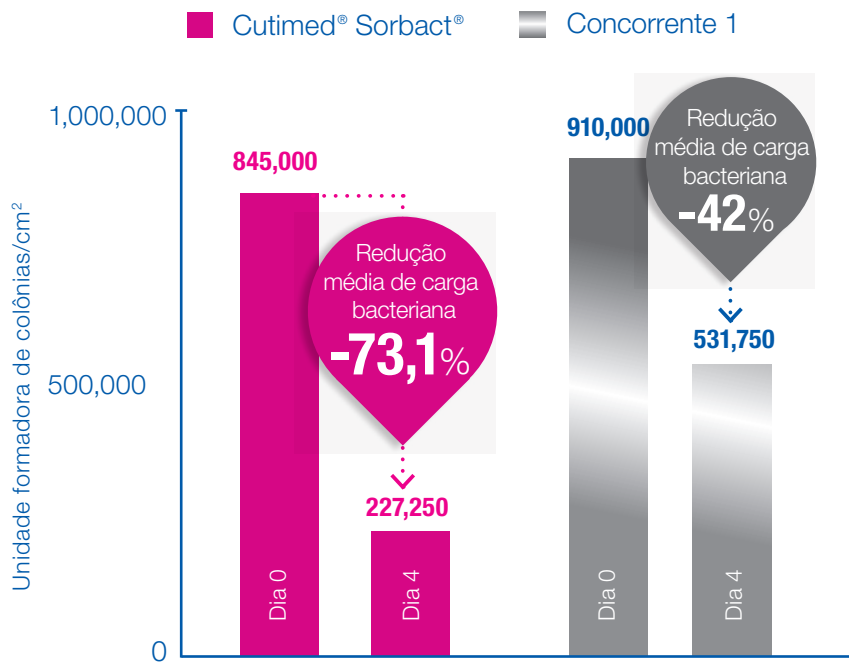


| Cutimed® Sorbact®   |  |  |
|---|--|--|
| Modo de ação  | Características                                | Benefícios   |
| Modo de ação puramente físico, através de atração hidrofóbica | Sem liberação de agentes antimicrobianos       | Pode ajudar a reduzir o potencial de irritações adicionais   |
|   | Não libera endotoxinas adicionais <sup>2</sup> | Pode reduzir o potencial de causar inflamações adicionais e atraso na cicatrização de feridas <sup>3</sup> |
|   | Nenhum mecanismo de resistência descrito       | Pode ajudar a reduzir o risco de gerar cepas bacterianas   |

<sup>1</sup> Mosti et al., Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study, Journal of Wound Care, 2015 Mar;24(3):121-2; 124-7


<sup>2</sup> As shown in vitro; Susilo YB, Husmark J, DACC Coated Wound Dressing and Endotoxin: Investigation on Binding Ability and Effect on Endotoxin Release from Gram-negative Bacteria. Poster presented at EWMA 2019.

<sup>3</sup> Ovington L. Bacterial toxins and wound healing. Ostomy Wound Manage. 2003 Jul;49(7A Suppl):8-12. Review.

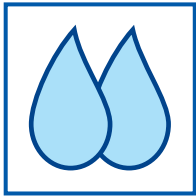

# Cutimed® Siltec® Sorbact® qualidade comprovada - Sem compromissos

Cutimed® Siltec® Sorbact® combina os benefícios do gerenciamento de infecção e exsudato usando a **inovadora camada de espuma que de forma suave entra em contato com a ferida vinculando as bactérias**. É adequado para gerenciar a carga bacteriana em feridas moderadas a altamente exsudativas

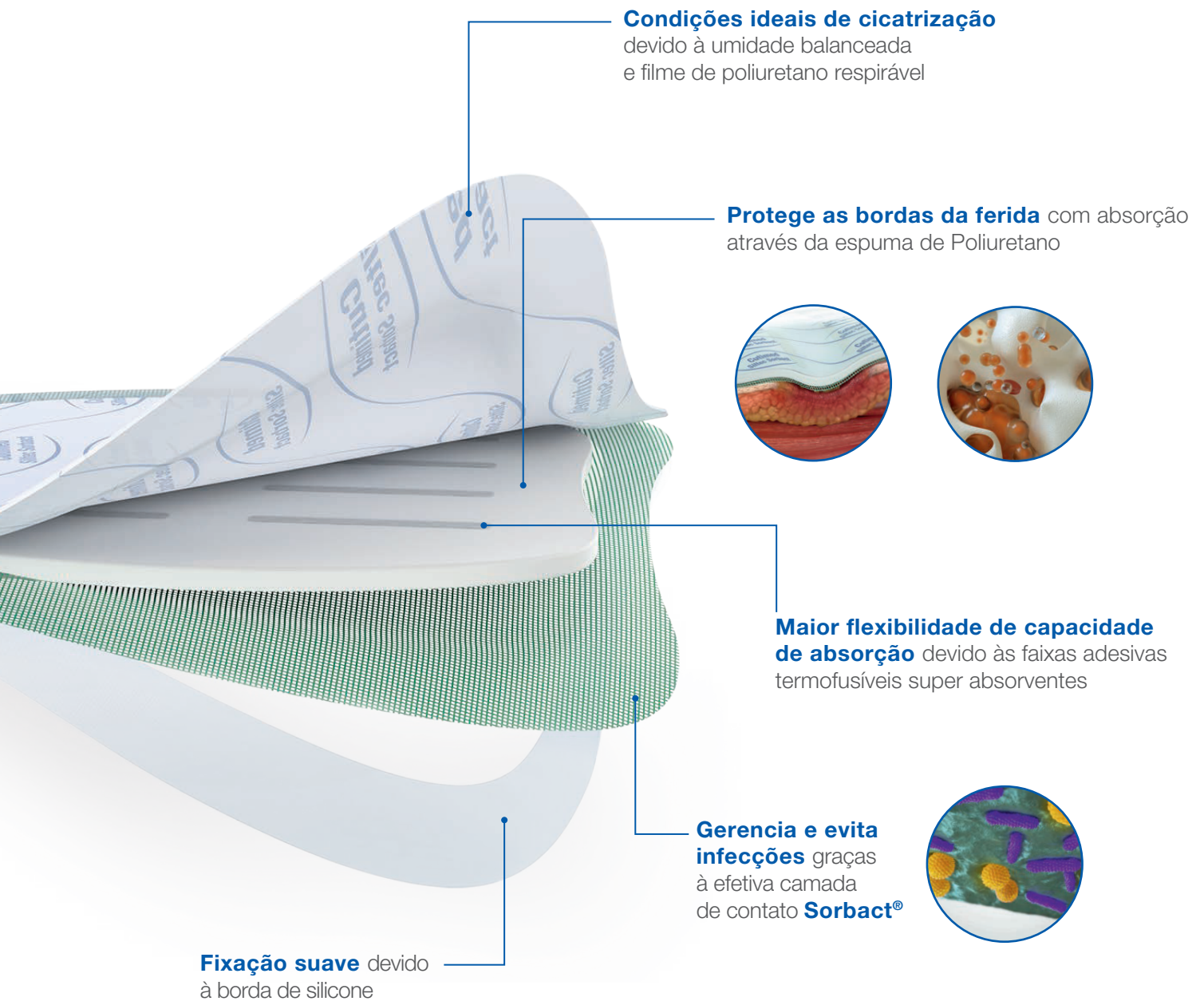




# Individual e de fácil aplicação

Devido às **formas especiais** e facilidade de corte, o **Cutimed® Siltec® Sorbact®** pode ser usado para todas as partes do corpo, respeitando as curvas

**Um catálogo detalhado de aplicação está disponível.** Por favor consulte seu representante de vendas para mais informações.



Para alterar o formato do curativo, você pode fazer cortes adicionais dentro da borda de fixação - não na espuma

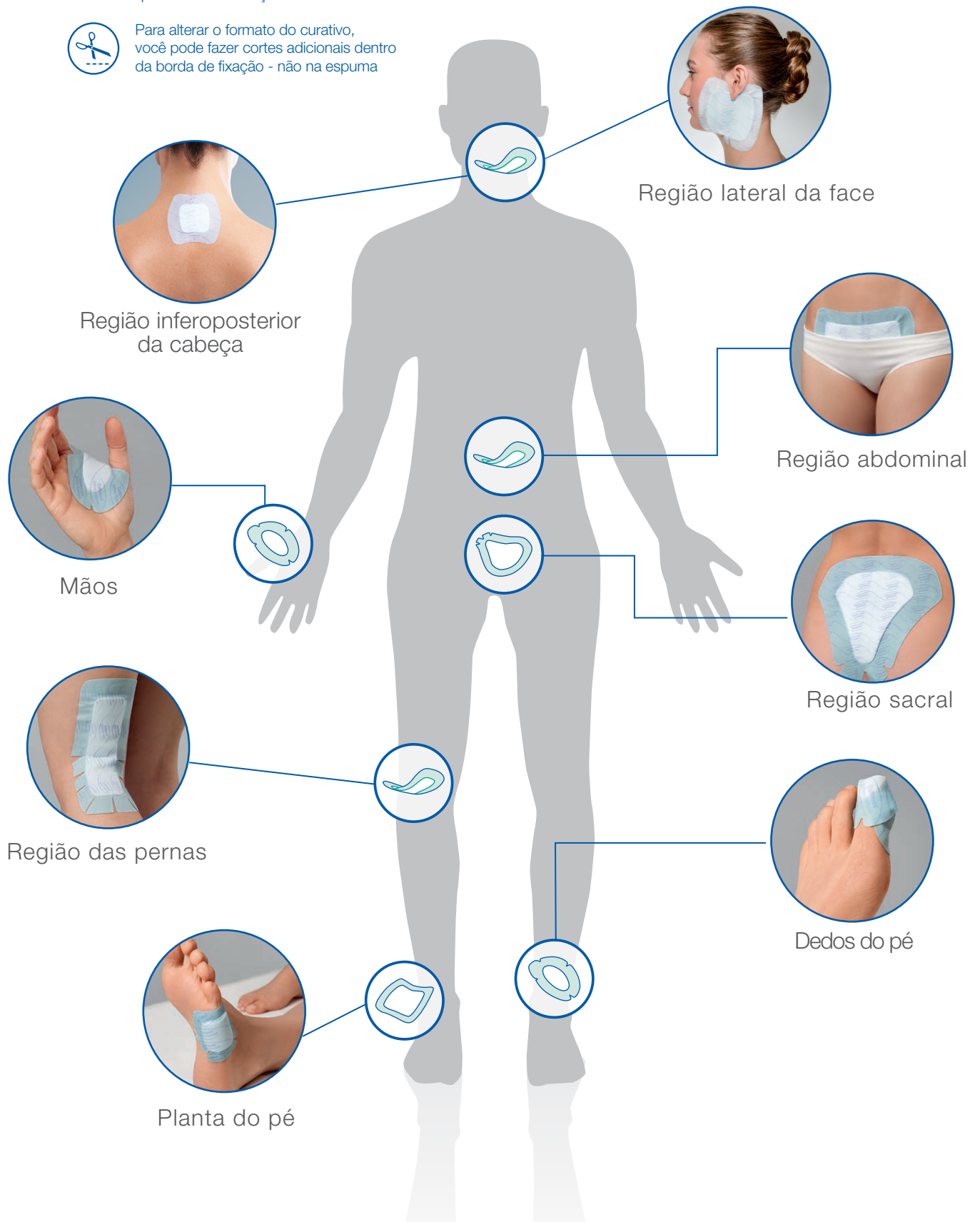

**Mude para uma solução segura**





e eficaz



## Informações para pedidos


| Cutimed®  | Tamanho da espuma   | Tamanho        | CÓD. NARS | Qtde. por caixa   |
|---|---|----------------|-----------|---|
| <b>Sorbact® Bandagem/fita</b><br>Para uso em feridas de cavidade de todos os tipos*   |    | 2 x 50 cm      | 72166-00  | 20  |
|   |   | 5 x 200 cm     | 72167-00  | 10  |
| <b>Sorbact® Compressa</b><br>Curativo plano e dobrado indicado para feridas superficiais e profundas*   |    | 4 x 6 cm       | 72164-00  | 40  |
|   |   | 7 x 9 cm       | 72165-00  | 40  |
| <b>Sorbact® Swabs Redondos</b><br>Pré-formado para feridas profundas e superficiais*  |  | 3cm Ø          | 72168-00  | Cartucho com 14 envelopes (5 unidades em cada envelope) |
| <b>Siltec® Sorbact®</b><br>Espuma super absorvente para feridas com exsudações altas ou moderadas; borda adesiva de silicone                            |  | 7.5 x 7.5 cm   | 73251-00  | 10  |
|   |   | 12.5 x 12.5 cm | 73251-01  | 10  |
|   |   | 15 x 15 cm     | 73251-02  | 10  |
|   |   | 17.5 x 17.5 cm | 73251-03  | 5   |
|   |   | 22.5 x 22.5 cm | 73251-04  | 5   |
| <b>Siltec® Sorbact® (sacrum)</b><br>Espuma super absorvente para feridas com exsudações altas ou moderadas; borda adesiva de silicone para região sacra |  | 17.5 x 17.5 cm | 73251-05  | 5   |
|   |   | 23 x 23 cm     | 73251-06  | 5   |

\* Esses curativos requerem um curativo adicional em cima para garantir o gerenciamento adequado do exsudato.

Pergunte ao seu representante de vendas ou peça seu kit de amostras.

**Veja por você mesmo - é hora de mudar para o verde!**





Por que não  
escolher um  
curativo com  
modo de ação  
puramente  
físico?










Cutimed®  
Sorbact® não libera  
nenhum agente  
antimicrobiano  
nas feridas



**Cutimed® Sorbact® é indicado para limpeza de feridas infectadas e colonizadas como:**

- Feridas crônicas (venosas, arteriais diabéticas ou lesões por pressão)
- Feridas deiscidas no pós-operatório
- Feridas traumáticas
- Feridas após fístulas e abscessos
- Infecções fungicas dérmicas

O curativo Cutimed® Sorbact® apropriado precisa ser escolhido de acordo com o portfólio

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p><b>NÍVEL DE EXUDATO</b></p> <p><b>Feridas infectadas</b></p>    |    |    |  |
|  |  <p><b>Cutimed® Siltec® Sorbact®</b></p> |  <p><b>Cutimed® Sorbact® bandagem/fita</b></p> <p><b>Cutimed® Sorbact® Swabs redondos</b></p> |   |
| <p><b>PREPARAÇÃO DO LEITO DA FERIDA</b></p> <p> Feridas superficiais</p> <p> Feridas profundas</p> <p> Feridas superficiais e profundas</p> |   |   |   |